


طقم جمع عينات المسحة متعددة الاختبارات Aptima®

دليل إجراءات جمع عينات المريضة

عينات المسحة المهبلية

اغسلي يديك قبل البدء. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا الإجراء، فُرجي طرحها على مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

افتحي عبوة المسحة جزئيًا وأخرجي المسحة. لا تلمسي الطرف الناعم أو تضعي المسحة. إذا تم لمس الطرف الناعم، أو وضعه، أو إسقاطه، فتخلصي منه واحصلي على طقم جديد لجمع عينات المسحة متعددة الاختبارات من Aptima. أمسكي المسحة، مع وضع الإبهام والسبابة في منتصف عمود المسحة فوق خط الدرجة.

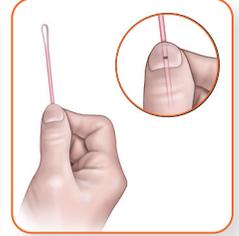

أدخلي المسحة بعناية في فتحة المهبل، حوالي 2 بوصة (5 سم)، وأديري المسحة برفق لمدة 10 إلى 30 ثانية. تأكدي من ملائمة المسحة لجدران المهبل بحيث تمتص المسحة الرطوية. اسحي المسحة دون لمس الجلد.




أثناء إمساك المسحة بيدك، فكي غطاء الأنبوب. لا تسكي محتويات الأنبوب. إذا انسكبت محتويات الأنبوب، فاطلي طقم جديد لجمع عينات المسحة متعددة الاختبارات من Aptima.



ملاحظة: لا تُدخلي خط الدرجة أسفل الحافة العلوية للقفية. لا تدفعي المسحة إلى أسفل القفية.

ضعي المسحة على الفور في أنبوب النقل بحيث يكون خط الدرجة أعلى الأنبوب. قومي بمحاذاة خط الدرجة مع الحافة العلوية للأنبوب واكسري عمود المسحة بعناية.

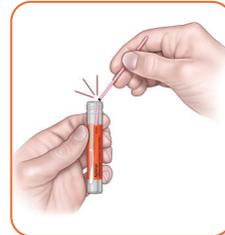

تخلصي من الجزء العلوي من العمود. اربطي الغطاء بإحكام على الأنبوب. أعيدي الأنبوب وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.



قد تتوفر ترجمات لدليل الجمع. يُرجى مراجعة مثل Hologic لمعرفة جميع أدلة الجمع.

تقدم Hologic دليل إجراءات الجمع هذا كأداة إعلامية عامة فقط؛ فهو ليس تعليمات مؤكدة أو ضمانًا للأداء. يتحمل الطبيب وحده مسؤولية قراءة وفهم النشرة الداخلية المناسبة والالتزام بالقواعد واللوائح المحلية والخاصة بالولاية والفيدرالية المعمول بها.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

المرجع: طقم جمع عينات المسحة متعددة الاختبارات Aptima - جمع العينات من المرضى. نشرة العيرة للولايات المتحدة الأمريكية AW-26254-001 Hologic, Inc. 2022.

أخرى. هذه المعلومات مخصصة للأخصائيين الطبيين في الولايات المتحدة والأوساط الأخرى وليس المقصود منها أن تكون طلبًا للمنتج أو ترويجًا حيث تكون هذه الأنشطة محظورة. نظرًا لأن مواد Hologic يتم توزيعها من خلال المواقع الإلكترونية والبث الإلكتروني والمعارض التجارية، فليس من الممكن دائمًا التمسك في مكان ظهور هذه المواد. للحصول على معلومات محددة حول المنتجات المتاحة للبيع في بلد معين، يُرجى الاتصال بممثل شركة Hologic أو مراسلته على diagnostic.solutions@hologic.com

