


Aptima® Multitest 棉棒標本採集套組

患者採集程序指南

適用於採集陰道棉棒標本

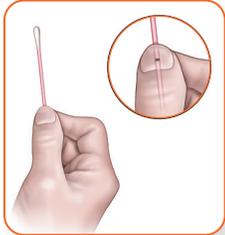

開始採集前先洗手。如果您對此程序有任何疑問，請詢問您的醫療保健提供者。

將棉棒包裝開啟一部分，再取出棉棒。請勿碰觸軟質棉棒頭或平放棉棒。如果碰觸了軟質棉棒頭、平放了棉棒、或將其掉落，請將其丟棄並取用新的 Aptima Multitest 棉棒標本採集套組。**將拇指和食指放在棉棒柄中間有劃痕線處，捏住棉棒。**



小心將棉棒伸入陰道口內約 2 英寸 (5 公分) 處，然後輕輕**旋轉棉棒 10 到 30 秒**。確保棉棒碰觸陰道壁，讓棉棒吸收其上水分。抽出棉棒，不要讓其碰觸到皮膚。



手中握住棉棒時，旋開試管蓋。請勿濺灑試管內容物。若試管內容物灑出，請索取新的 Aptima Multitest 棉棒標本採集套組。



立即將棉棒放入運送試管內，讓劃痕線處於試管頂端。將劃痕線與試管上緣對齊，然後小心折斷棉棒柄。



注意：請勿將劃痕線插至小瓶上緣之下。請勿將棉棒推至小瓶底。



丟棄棉棒柄的上端部分。將蓋子蓋回試管，旋緊。依照醫療保健提供者的指示交回試管。

可能提供採集指南的譯文。請與您的 Hologic 代表聯絡，以獲取所有採集指南。

Hologic 提供本採集程序指南，僅作提供一般資訊之用；該指南並非確然性質之指示或採集性能之保證。臨床醫師須負起閱讀和了解合適仿單之全責，並遵從適用之當地、州府和聯邦的規定和法規。

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

參考資料：Aptima Multitest 棉棒標本採集套組 - 患者採集。美國仿單 AW-26254-001。Hologic, Inc.; 2022.

DS-01553-501 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. 保留所有權利。Hologic、Aptima 以及相關標誌是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美國和/或其他國家或地區的商標和/或註冊商標。這些資訊專為美國和其他市場的专业醫護人員設計，無意於在禁止產品招攬或促銷活動的區域用作此類活動的資料。由於 Hologic 的資料是透過網站、網路直播和貿易展覽分發的，因此有時無法控制此類資料出現的區域。如需某一特定國家或地區銷售哪些產品的具體資訊，請聯絡您的 Hologic 代表或寫信至：diagnostic.solutions@hologic.com。

